

Lephanet

Uso previsto:

HIGIENE PALPEBRAL

LEPHANET está indicado para la higiene diaria de los párpados, y en especial:

- En caso de pieles, párpados u ojos sensibles
- Para eliminar el polvo, el polen y las secreciones de los párpados. Puede formar parte del cuidado habitual en caso de alergia o infección ocular
- En caso de inflamación o infección de los párpados, como blefaritis, disfunción de las glándulas de Meibomio, orzuelos o chalazión. Estas afecciones pueden causar síntomas de ojo seco como picor, sensación de arenilla, dolor o enrojecimiento ocular
- Cuando es necesario limpiar los párpados antes de un procedimiento oftálmico, como inyecciones terapéuticas en el ojo (inyecciones intravítreas), cirugía láser ocular (LASIK o PRK) y cirugía de catarata. Gracias a su buena tolerabilidad, LEPHANET también puede utilizarse después de la cirugía, según las indicaciones del médico u oftalmólogo.

LEPHANET mantiene los párpados limpios a la vez que respeta la piel alrededor de los ojos y su flora bacteriana natural.

Antes de la cirugía ocular, utilizar **dos veces al día** durante 5 días o siguiendo las indicaciones de su médico o farmacéutico. En los demás casos, utilizar **dos veces al día** por la mañana y por la noche durante 3 semanas y, a partir de entonces, una vez al día durante 3 meses o siguiendo las indicaciones de su médico o farmacéutico. Algunas afecciones palpebrales son crónicas, por lo que puede ser necesario continuar con la higiene de los párpados a largo plazo.

No precisa aclarado después de su uso.


LEPHANET puede utilizarse en niños a partir de 3 meses.

El producto se ha testado bajo control oftalmológico.


Si utiliza lentes de contacto: debe retirarlas antes de usar LEPHANET.

Modo de empleo:

1. Higiene de párpados y pestañas:
Abra el sobre y despliegue la toallita. Con el ojo cerrado, aplique con suavidad la toallita sobre los párpados y la base de las pestañas. Efectúe un suave masaje en los párpados realizando movimientos circulares para eliminar costras, secreciones o maquillaje.

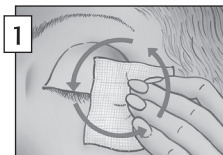

2. Higiene del borde palpebral:
Frente a un espejo, abra el párpado tirando suavemente de las pestañas hacia abajo. Enrolle la toallita y frote suavemente el borde palpebral.

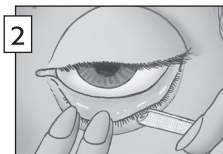

Repita la operación en el ojo contrario usando una toallita nueva.

Precauciones de uso y advertencias:

Solo para uso cutáneo, no aplicar directamente en los ojos. No lo utilice si es alérgico a cualquiera de los componentes.

LEPHANET es un producto estéril, **para un solo uso**.

No reutilice las toallitas, ya que su eficacia puede verse reducida y puede aumentar el riesgo de infección.

No utilice la toallita si el sobre está abierto o dañado.

El color de la toallita (loción) puede variar. Esto se debe a los extractos vegetales naturales y es normal.

Si los síntomas empeoran, deje de usar LEPHANET y póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en el sobre. La fecha de caducidad hace referencia al producto dentro del envase intacto y correctamente conservado.

Las toallitas usadas deben tirarse a la basura.

Conservar el producto entre 8 °C y 25 °C.

MANTENER FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Posibles efectos adversos:

Se han notificado los siguientes acontecimientos adversos con LEPHANET: sensación de quemazón o picor durante algunos minutos tras su uso, enrojecimiento o hinchazón de los párpados, reacciones alérgicas.

Descripción del producto:

Toallita estéril, impregnada con una loción. Contenido de la loción: capriloilglicina, hialuronato sódico, PEG 8, poloxámero 184, polisorbato 20, propilenglicol, extracto de hidrocotilo (propilenglicol, extracto de *Centella asiatica* y agua), complejo seborregulador sin conservantes (propilenglicol, extracto de raíz de *Iris florentina*, sulfato de zinc, PPG-5 Ceteth 20 y retinol palmitato [vitamina A], alcohol y agua), PEG 6 glicéridos caprílicos/cápricos (caprilocaprato de macrogol-6-glicerol), fosfato dipotásico, hidróxido de sodio, dihidrógeno fosfato de potasio, agua purificada.

Fecha de revisión las instrucciones de uso:

Febrero de 2016

Comercializado por:

Laboratorios THEA S.A
C/ Enric Granados
nº 86-88, 2ª planta
08008 Barcelona



Fabricante:

Laboratoires THEA

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francia



Conservar entre 8 °C y 25 °C



No reutilizar



No utilizar si el envase (sobre) está dañado

STERILE R

Esterilización por irradiación



Consultar las instrucciones de uso



Precaución



Fecha de caducidad

LOT

Número de lote

CE 0459